


ジェイフィード®ENシリンジ専用〈シリンジポンプ型〉

JMS経腸栄養ポンプ EN-SP50

新発売

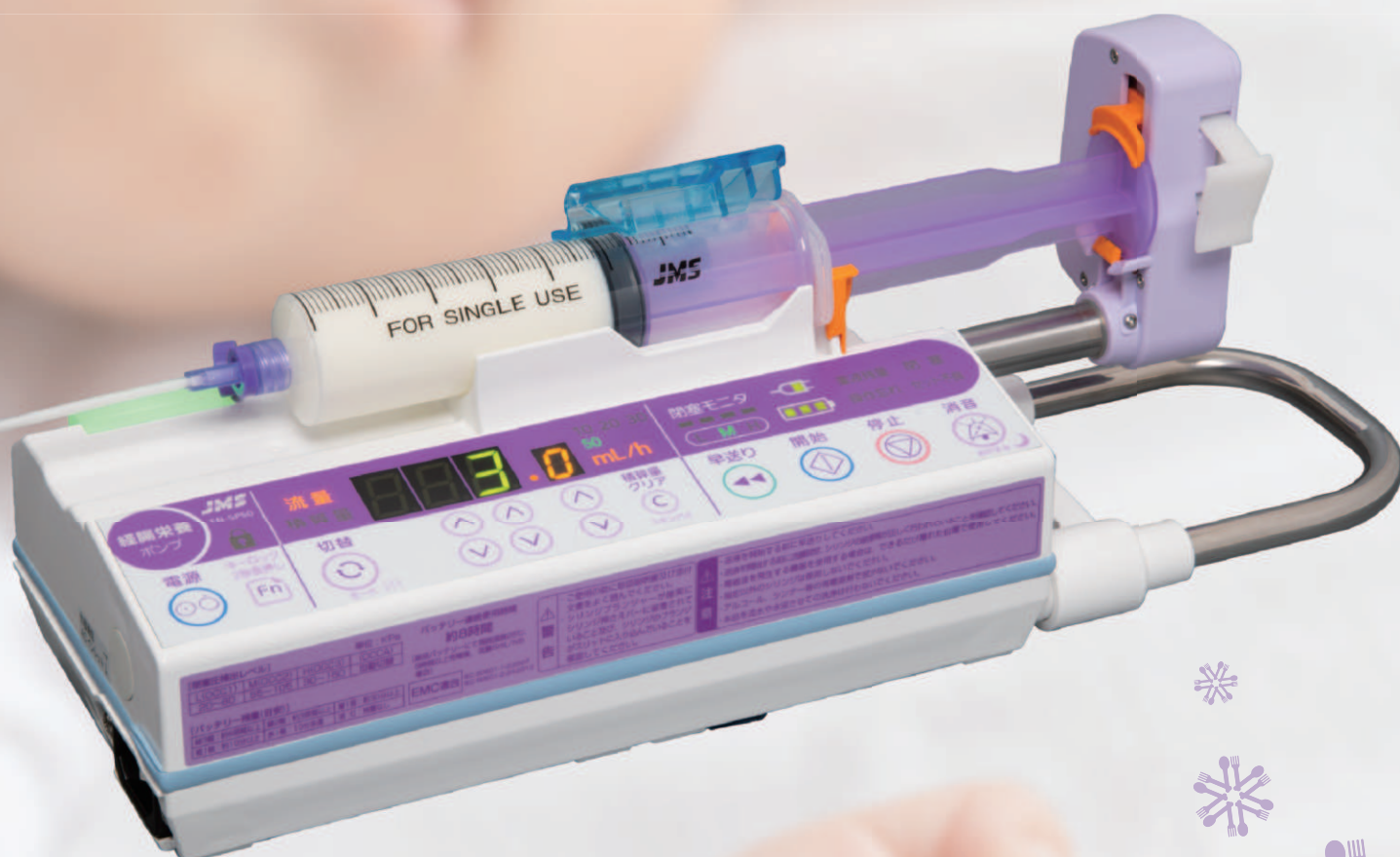

ジェイフィード® ENシリンジ専用の 経腸栄養ポンプが新登場！

NICU領域などで、ミルクや栄養剤等を持続的に一定の流量で注入したいときに便利。



閉塞圧検出設定は栄養剤等投与を考慮した3段階の設定



色調はジェイフィード® ENシリンジに合わせ、紫色を採用




夜間でも優しい「おやすみモード」



安心操作の「ボイスナビゲーション機能」



小型・軽量のため、持ち運びや保管時も省スペース

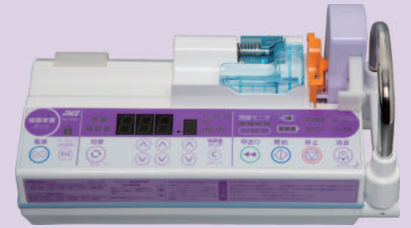

装置仕様

販売名	JMS経腸栄養ポンプ EN-SP50
品番	JM-ENSP50
医療機器承認番号	30300BZX00052000
使用可能シリンジ	ジェイフィード® ENシリンジ 10、20、30、50mL (製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス)
流量精度	シリンジを含む精度：±3%以内 (新品のシリンジを使用し、1.00mL/h以上の一定流量にて送液開始1時間以降の1時間ごとの精度)
機械精度	機械精度：±1%
流量設定機能設定範囲	0.1～300.0mL/h(0.1mL/hステップ) 流量上限値設定機能を使用して0.1～999.0mL/hの範囲で早送り流量まで変更可能
積算量表示機能表示範囲	0.1～999.9mL
閉塞圧検出精度	[H]：120±30 kPa(900.1±225.0 mmHg)(1.22±0.31kgf/cm ²) [M]：80±25 kPa(600.1±187.5 mmHg)(0.82±0.26kgf/cm ²) [L]：40±20 kPa(300.0±150.0 mmHg)(0.41±0.20kgf/cm ²)
早送り流量	10mLシリンジ：300mL/h 20mLシリンジ：300、500mL/h 30mLシリンジ：300、700mL/h 50mLシリンジ：300、1200mL/h
保護機能	低優先度アラーム：薬液残量警報/操作忘れ警報/バッテリー残量警報 その他保護機能：再警報
高優先度アラーム	閉塞警報/薬液残量警報/シリンジセット不良警報/シャットダウン警報
付帯機能	シリンジサイズ表示機能/スタンバイモード/桁上げ安全機能/閉塞圧検出レベル表示機能/閉塞モニタ表示機能/閉塞圧検出レベル自動切替機能/閉塞圧検出レベル切替機能/ 送液中流量設定機能/薬液残量警報発生時間切替機能/電源コード外れ検出機能/バッテリー残量表示機能/シャットダウン機能/バッテリーリフレッシュ機能/ バッテリーリフレッシュ時期表示機能/キーロック機能/ボイスナビゲーション機能/ボイスナビゲーション音量切替機能/おやすみモード/警報音量切替機能/表示明るさ切替機能/ 積算量クリア機能/外部通信機能/外部コントロール機能/ヒストリ機能/ヒストリ表示機能/ナースコール機能/総合メンテナンス時期表示機能/日付時刻設定機能/ 早送り流量切替機能/流量上限値設定機能/操作忘れ警報発生条件切替機能/操作忘れ警報発生時間設定機能/スタンバイモード時間切替機能/桁上げ安全機能オンオフ切替機能/ 送液中流量設定機能オンオフ切替機能/バッテリーリフレッシュタイマー設定機能/バッテリーリフレッシュ情報表示機能/警報音量(おやすみモード)切替機能/警報音色L切替機能/ 警報音色L切替機能/ボイスナビゲーション音量(おやすみモード)切替機能/ボイスナビゲーションオンオフ切替機能/おやすみモード時間設定機能/外部通信設定機能/ 外部コントロールロックオンオフ切替機能/再警報発生時間設定機能/表示明るさ(おやすみモード)切替機能/総駆動時間表示機能/メンテナンスタイマー機能/ メンテナンスタイマー設定機能/シリアル番号表示機能
電源	AC電源：100V±10% 50または60Hz 内蔵バッテリー(Ni-MH電池)：9.6V 約1900mAh 約8時間(新品バッテリー、6時間以上充電、流量5.0mL/h、周囲温度25℃) DC電源(専用電源使用時)：15V
消費電力	28VA(AC電源時)、14W(DC電源時)
分類	クラスI機器および内部電源機器、CF形装着部、IPX4(防まつ)
EMC規格	IEC 60601-1-2:2007、JIS T 0601-2-24:2018 EMC適合
外形寸法	223(幅)×123(高さ)×110(奥行)mm(突起部含まず)
重量	約1.6kg
付属品	AC電源コード、専用台、取扱説明書(保証書付)、添付文書



2003 医療事故防止対策通知※対応

本マークは医療事故対策のために設定された厚生労働省基準に適合することを示す業界の自主的なマークです。

※関連企業を対象とした厚生労働省通知「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」医薬発第0318001号：平成15年3月18日



<http://www.jms.cc/>

販売業者 株式会社 ジェイ・エム・エス
東京都品川区南大井 1-13-5

製造販売業者 大研医器株式会社
大阪府和泉市あゆみ野 2-6-2

2021.03.05XA247-JMS

●ジェイフィードは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。